

KYLMÄLÄHETYSTÄ VAATIVIEN VERI- JA VIRTSA-NÄYTTEIDEN PAKKAAMINEN STYROX-KOTELOON YÖN YLI LÄHETETTÄVISSÄ KURIIRILÄHETYKSISSÄ

- Tämä ohje koskee kaikkia kylmälähetystä vaativia veri- ja virtsanäytteitä (kts. tutkimusohjekirja: Säilytys ja lähetys).
- **Kesällä lämpötilan ylittäessä +25°C ja talvella lämpötilan laskiessa alle -10°C** myös näytteet, jotka eivät saa lämmetä, sekä näytteet, jotka eivät saa jäätymä (esim. B-PVK- ja B-TVK-näytteet), pakataan tämän ohjeistuksen mukaisesti. Muina aikoina nämä näytteet lähetetään tutkimusohjekirjan ohjeiden mukaisesti.

Tarvikkeet on tilattavissa tarviketilaussivuston kautta:

- styrox-kotelo iso sis. 2kpl valkoisia pakastettavia kylmägeelejä
- putkimoduuli
- imuliina
- salpapussi

Huom! Näytteet tulee säilyttää jääkaappilämpötilassa näytteenotosta näytteiden lähetykseen.



Pakkausohje:


1. Kylmälähetyksessä käytetään vain pakastettuja geelejä. Pakasta geelejä vähintään 1vrk. HUOM! Ota geelit huoneenlämpöön **15min ennen** näytteiden pakkaamista. Geelejä ei saa laittaa pakkaukseen suoraan pakastimesta, vaan niitä on ehdottomasti pidettävä huoneenlämmössä 15min (max.25min). Huom! Käytä vain kuvassa näkyviä valkoisia geelejä, ei sinisiä.



2. Laita yksi (1) pakastettu geeli styrox-boksin pohjalle. Joudut hieman taittamaan geeliä, jotta saat sen laitettua hyvin pohjalle.



3. Laita geelin päälle kaksi (2) taiteltua imuliinaa.

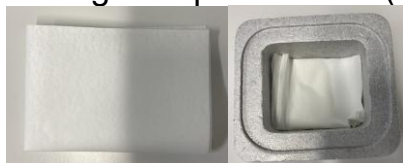

4. Pakkaa näytteet (7kpl) putkimoduuliin (moduulin voi tarvittaessa leikata sopivan mittaiseksi) ja laita ne minigrip-pussiin imuliinan kanssa. Aseta näytteet styrox-boksiin imuliinojen päälle *vaakatasossa*. Voit laittaa vielä toisen putkimoduulin näytteineen toisen päälle.



5. Laita näytteiden päälle kaksi (2) taiteltua imuliinaa.



6. Laita imuliinan päälle yksi (1) pakastettu geeli. Joudut hieman taittamaan geeliä, jotta saat sen laitettua hyvin boksiin. Laita geelin päälle vielä yksi (1) imuliina ja sulje kansi. Laita tarvittaessa vielä kuminauha boksin ympäri, jotta kansi pysyy varmasti kiinni.

