

Arvoisa asiakas,

Seerumin aldosteronin menetelmä- ja viitearvomuutos välittömästi voimaan

Aldosteroni, seerumin


fS-Aldos KL 1034

fS-Aldos-M KL 1036

fS-Aldos-P KL 1037

Alihankintana teetettävän aldosteronin menetelmää on muutettu ennalta ilmoittamatta. Tekopaikka on ottanut käyttöön kemiluminometrisen menetelmän (LIAISON Aldosterone, CLIA) ja modifioinut aikuisten viitearvoja. Aikuisten seerumin aldosteronin makuu – ja pystyviitevälejä on laajennettu. Lasten viitearvot säilyvät ennallaan.

Uuden ja vanhan menetelmän korrelaatioyhtälö on $y = 0,7737x + 21,889$, $R = 0,8552$

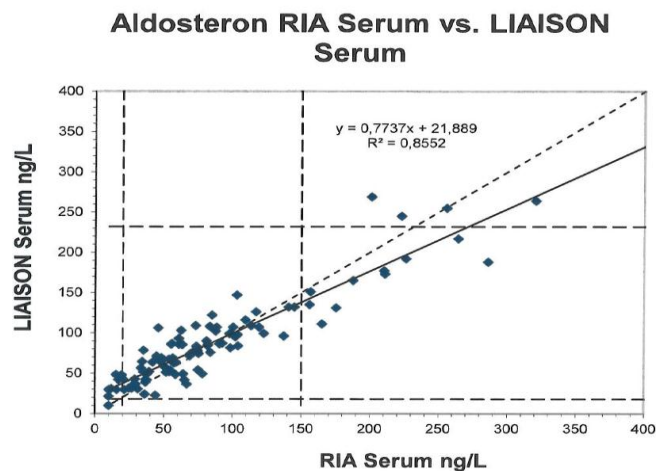

Yksittäisissä potilasnäytteissä tulostaso saattaa muuttua, mikä tulee ottaa huomioon seurannassa olevilla potilailla.

Uudet aikuisten viitearvot ovat:

KL 1036	fS-Aldos-M	32 – 654 pmol/l
KL 1037	fS-Aldos-P	61 – 978 pmol/l

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 31.3.2014 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:

sairaalakemisti Lena Lindroth-Vesterinen

puh. (09) 525 6228

lena.lindroth-vesterinen@medix.fi